

XDCOLLECTION

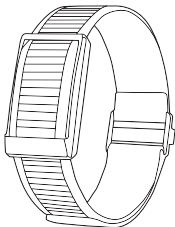

Endo
Wearable health tracker

Copyright© XD P330.90XX

Contents

English	p. 3
Nederlands	p. 7
Deutsch	p. 11
Français	p. 15
Español	p. 19
Svenska	p. 23
Italiano	p. 27
Polski	p. 31
Explanation WEEE logo:	p. 35


ENGLISH

DEVICE REQUIREMENTS:

IOS 9.0 or later, Android 5.0 or later, Bluetooth 5.3.

INSTALL THE APP

Download the app by either scanning the QR code or search for "FitCloudPro" and download in the Apple Store or Google Play Store.

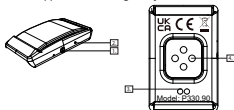

DEVICE LAYOUT

1. On/Off
2. Indicator light
3. Charging port
4. Heart rate & blood oxygen sensor

SPECIFICATIONS

Battery Capacity	145 mAh
Input	5V/0.5A
Working time	12 days
Charging time	2 hour
BT version	5.4



BT pairing name	Endo
Compatibility	IOS 9.0 + Android 5.0
Waterproof	1ATM

*Times are approximate times only, depending on battery condition.

Important: Only use included accessories or certified and tested accessories to power this device. Using third party accessories can influence the item safety.

CHARGING

Before using the health tracker for the first time, please ensure it is fully charged. Use the equipped magnetic charger cable. Plug the USB-A end into a USB-A port on a computer or a compatible 5V/0.5A power adapter. While charging the light indicator is red. When fully charged the indicator light is off. Full charging takes approximately 2 hours.

CONNECTING

1. After you downloaded the app, turn on Bluetooth on your phone. Open the FitCloudPro app, enter the device page and press 'Bind Device'. The app will find the health tracker as 'Endo'.
2. After the health tracker is successfully paired with the app, a prompt will pop up asking for permissions to use the wireless call function. Press 'Allow'. Only then can the phone call function be used.

Note:

- Please do not directly pair the device in the Bluetooth list of the mobile phone system to avoid the situation where the "FitCloudPro" APP fails to connect to the health tracker.
- Please allow the "FitCloudPro" APP to obtain permissions such as "Location, Phone, Camera" of your mobile phone to ensure a successful pairing.

-
- Device must connect through the App. Do not pair directly by BT on your mobile device.

FUNCTION INTRODUCTION

1. Step Tracking

Tracks daily steps to monitor activity levels.

2. Heart Rate Monitoring

Automatically measures heart rate (approximately every 30 minutes).

3. Blood Oxygen Monitoring

Measures blood oxygen levels on demand.

4. Notifications

Vibrates and displays alerts for calls, messages, and apps.

5. Alarm Function

Set alarms for reminders and wake-up alerts.

6. Women's Health Tracking

Tracks menstrual cycles and related data.

7. Remote Camera Control

Shake the device to take photos on your phone.

8. Find Device

Locate your tracker via the app (device will vibrate).

9. Sport Modes

Supports activity modes (excluding water sports).

10. Sleep Tracking

Tracks sleep when worn overnight (recommended: 10:00 PM – 8:00 AM).

WARNING!

1. The app is not a medical device. Data obtained during the use of the app is for reference only, and should not be used for clinical diagnostic, medical research, diagnostic, or treatment purposes.
2. Please avoid the bracelet from strong impact, extreme heat and exposure.
3. Do not disassemble, repair or modify the watch yourself.
4. This watch uses 5V/0.5A for charging. It is strictly prohibited to use over-voltage load power supply for charging
5. Do not charge for more than 8 hours.
6. The operating environment of this watch is 0 ° - 40 °. It is forbidden to throw it into fire to avoid causing explosion.
7. Do not touch chemicals such as gasoline, cleaning solvents, propanol, alcohol, or insect repellent.
8. Do not use this product in high voltage and high magnetic environment.
9. If you have sensitive skin or you wear your bracelet too tightly, you may feel uncomfortable.
10. Please wipe off the sweat drops on your wrist in time. The strap may be exposed to soap, sweat, allergens or pollution components for a long time, which may cause itchy skin.
11. If you use it often, it is recommended to clean the bracelet every week. Wipe with a damp cloth and remove oil or dust with a mild soap. It is not advisable to wear a bracelet to take a hot bath.


NEDERLANDS

SYSTEEMVEREISTEN:

iOS 9.0 of hoger, Android 5.0 of hoger, Bluetooth 5.3.

INSTALLEER DE APP

Download de app door de QR-code te scannen of zoek naar „FitCloudPro” en download de app in de Apple Store of Google Play Store.

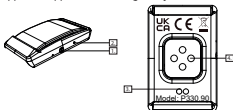

INDELING VAN HET APPARAAT

1. Aan/uit
2. Indicatielampje
3. Oplaadpoort
4. Hartslag- en bloedzuurstofsensor

SPECIFICATIES

Batterijcapaciteit	145 mAh
Ingang	5V/0,5A
Gebruiksduur	12 dagen
Oplaadtijd	2 uur
BT-versie	5.4



BT-koppelingsnaam	Endo
Compatibiliteit	iOS 9.0 + Android 5.0
Waterdicht	1 ATM

*Tijden zijn slechts bij benadering en afhankelijk van de batterijconditie.

Belangrijk: Gebruik alleen meegeleverde accessoires of gecertificeerde en geteste accessoires om dit apparaat van stroom te voorzien. Het gebruik van accessoires van derden kan de veiligheid van het product beïnvloeden.

OPLADEN

Zorg ervoor dat de health tracker volledig is opgeladen voordat u deze voor het eerst gebruikt. Gebruik de meegeleverde magnetische oplaadkabel. Sluit het USB-A-uiteinde aan op een USB-A-poort van een computer of een compatibele 5V/0,5A-voedingsadapter. Tijdens het opladen brandt het indicatielampje rood. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, is het indicatielampje uit. Het volledige opladen duurt ongeveer 2 uur.

VERBINDEN

1. Nadat u de app hebt gedownload, schakelt u Bluetooth in op uw telefoon. Open de FitCloudPro-app, ga naar de apparaatpagina en druk op 'Apparaat koppelen'. De app vindt de gezondheidstracker als 'Endo'.
2. Nadat de gezondheidstracker succesvol is gekoppeld met de app, verschijnt er een melding waarin om toestemming wordt gevraagd om de draadloze belfunctie te gebruiken. Druk op 'Toestaan'. Pas dan kan de belfunctie worden gebruikt.

Opmerking:

- Koppel het apparaat niet rechtstreeks via de Bluetooth-lijst van het mobiele telefoonsysteem om te voorkomen dat de 'FitCloudPro'-app geen verbinding kan maken met de gezondheidstracker.

-
- Geef de 'FitCloudPro'-app toestemming voor functies zoals 'Locatie, Telefoon, Camera' op uw mobiele telefoon om een succesvolle koppeling te garanderen.
 - Het apparaat moet via de app worden verbonden. Koppel niet rechtstreeks via Bluetooth op uw mobiele apparaat.

FUNCIE-INLEIDING

1. Stappenregistratie

Registreert dagelijkse stappen om het activiteitsniveau te monitoren.

2. Hartslagmeting

Meet automatisch de hartslag (ongeveer elke 30 minuten).

3. Bloedzuurstofmeting

Meet het zuurstofgehalte in het bloed op verzoek.

4. Meldingen

Trilt en geeft meldingen weer voor oproepen, berichten en apps.

5. Alarmfunctie

Stel alarmen in voor herinneringen en wekmeldingen.

6. Gezondheidsmonitoring voor vrouwen

Houdt menstruatiecycli en gerelateerde gegevens bij.

7. Camera op afstand bedienen

Schud het apparaat om foto's te maken op uw telefoon.

8. Apparaat zoeken

Lokaliseer uw tracker via de app (het apparaat trilt).

9. Sportmodi

Ondersteunt activiteitsmodi (exclusief watersporten).

10. Slaapregistratie

Registreert de slaap wanneer het apparaat 's nachts wordt gedragen (aanbevolen: 22:00 – 08:00 uur).

WAARSCHUWING!

1. De app is geen medisch hulpmiddel. Gegevens die tijdens het gebruik van de app worden verkregen, zijn uitsluitend ter referentie en mogen niet worden gebruikt voor klinische diagnose, medisch onderzoek, diagnostiek of behandelingsdoeleinden.
2. Vermijd sterke schokken, extreme hitte en blootstelling aan deze omstandigheden.
3. Demonteer, repareer of wijzig het horloge niet zelf.
4. Dit horloge gebruikt 5V/0,5A voor het opladen. Het is ten strengste verboden om een voeding met een te hoge spanning te gebruiken voor het opladen.
5. Laad het niet langer dan 8 uur op.
6. De gebruiksomgeving van dit horloge is 0 °C tot 40 °C. Het is verboden om het in vuur te gooien om explosie te voorkomen.
7. Raak geen chemicaliën aan zoals benzine, reinigingsmiddelen, propanol, alcohol of insectenwerend middel.
8. Gebruik dit product niet in een omgeving met hoge spanning of sterke magnetische velden.
9. Als u een gevoelige huid heeft of de armband te strak draagt, kunt u ongemak ervaren.
10. Veeg zweetdruppels op uw pols tijdig weg. De band kan langdurig worden blootgesteld aan zeep, zweet, allergenen of verontreinigende stoffen, wat jeuk kan veroorzaken.
11. Als u het vaak gebruikt, wordt aanbevolen de armband wekelijks schoon te maken. Veeg af met een vochtige doek en verwijder olie of stof met een milde zeep. Het is niet raadzaam een armband te dragen tijdens het nemen van een warm bad.


DEUTSCH

GERÄTEANFORDERUNGEN:

iOS 9.0 oder höher, Android 5.0 oder höher, Bluetooth 5.3.

APP INSTALLIEREN

Laden Sie die App herunter, indem Sie entweder den QR-Code scannen oder im Apple Store oder Google Play Store nach „FitCloudPro“ suchen und die App herunterladen.

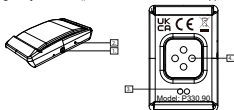

GERÄTEANORDNUNG

1. Ein/Aus
2. Kontrollleuchte
3. Ladeanschluss
4. Herzfrequenz- und Blutsauerstoffsensordatum

TECHNISCHE DATEN

Akkukapazität	145 mAh
Eingangsleistung	5 V/0,5 A
Betriebsdauer	12 Tage
Ladezeit	2 Stunden
BT-Version	5.4



BT-Kopplungsname	Endo
Kompatibilität	iOS 9.0 + Android 5.0
Wasserdicht	1 ATM

*Die angegebenen Zeiten sind nur ungefähre Werte und hängen vom Zustand des Akkus ab.

Wichtig: Verwenden Sie zur Stromversorgung dieses Geräts ausschließlich das mitgelieferte Zubehör oder zertifiziertes und geprüftes Zubehör. Die Verwendung von Zubehör von Drittanbietern kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

AUFLADEN

Bevor Sie den Health Tracker zum ersten Mal verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass er vollständig aufgeladen ist. Verwenden Sie das mitgelieferte magnetische Ladekabel. Stecken Sie das USB-A-Ende in einen USB-A-Anschluss eines Computers oder eines kompatiblen 5V/0,5A-Netzteils. Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte rot. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Kontrollleuchte. Der vollständige Ladevorgang dauert ca. 2 Stunden.

VERBINDEN

1. Nachdem Sie die App heruntergeladen haben, schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein. Öffnen Sie die FitCloudPro-App, rufen Sie die Geräteseite auf und tippen Sie auf „Gerät koppeln“. Die App findet den Health-Tracker unter dem Namen „Endo“.
2. Nachdem der Health-Tracker erfolgreich mit der App gekoppelt wurde, erscheint eine Meldung, in der Sie um die Erlaubnis zur Nutzung der Telefoniefunktion gebeten werden. Tippen Sie auf „Zulassen“. Erst dann kann die Telefoniefunktion genutzt werden.

Hinweis:

- Bitte koppeln Sie das Gerät nicht direkt über die Bluetooth-Liste des Mobiltelefons, um zu vermeiden, dass die „FitCloudPro“-App keine Verbindung

zum Gesundheits-Tracker herstellen kann.

- Bitte erteilen Sie der „FitCloudPro“-App die Berechtigungen für „Standort, Telefon, Kamera“ Ihres Mobiltelefons, um eine erfolgreiche Kopplung sicherzustellen.
- Das Gerät muss über die App verbunden werden. Koppeln Sie es nicht direkt über Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät.

FUNKTIONSÜBERSICHT

1. Schrittzähler

Erfasst die täglichen Schritte, um das Aktivitätsniveau zu überwachen.

2. Herzfrequenzmessung

Misst automatisch die Herzfrequenz (ca. alle 30 Minuten).

3. Blutsauerstoffmessung

Misst den Blutsauerstoffgehalt auf Abruf.

4. Benachrichtigungen

Vibriert und zeigt Benachrichtigungen für Anrufe, Nachrichten und Apps an.

5. Weckfunktion

Stellen Sie Wecker für Erinnerungen und Weckalarme ein.

6. Frauen-Gesundheits-Tracking

Verfolgt Menstruationszyklen und zugehörige Daten.

7. Fernsteuerung der Kamera

Schütteln Sie das Gerät, um Fotos auf Ihrem Smartphone aufzunehmen.

8. Gerät suchen

Lokalisieren Sie Ihren Tracker über die App (das Gerät vibriert).

9. Sportmodi

Unterstützt Aktivitätsmodi (ausgenommen Wassersport).

10. Schlafaufzeichnung

Zeichnet den Schlaf auf, wenn das Gerät über Nacht getragen wird (empfohlen: 22:00 Uhr – 08:00 Uhr).

WARNUNG!

1. Die App ist kein medizinisches Gerät. Die während der Nutzung der App gewonnenen Daten dienen nur als Referenz und sollten nicht für klinische Diagnose, medizinische Forschung, Diagnostik oder Behandlungszwecke verwendet werden.
2. Bitte setzen Sie das Armband keinen starken Stößen, extremer Hitze und direkter Sonneneinstrahlung aus.
3. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie die Uhr nicht selbst.
4. Diese Uhr wird mit 5 V/0,5 A aufgeladen. Die Verwendung eines Netzteils mit zu hoher Spannung zum Aufladen ist strengstens untersagt.
5. Laden Sie die Uhr nicht länger als 8 Stunden auf.
6. Die Betriebsumgebung dieser Uhr liegt zwischen 0 °C und 40 °C. Es ist verboten, sie ins Feuer zu werfen, um Explosionen zu vermeiden.
7. Vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien wie Benzin, Reinigungslösungsmitteln, Propanol, Alkohol oder Insektenschutzmitteln.
8. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Spannung oder starker Magnetfeldbelastung.
9. Wenn Sie empfindliche Haut haben oder das Armband zu fest tragen, kann es zu Unbehagen kommen.
10. Bitte wischen Sie Schweißtropfen an Ihrem Handgelenk rechtzeitig ab. Das Armband kann über einen längeren Zeitraum Seife, Schweiß, Allergenen oder Schadstoffen ausgesetzt sein, was zu juckender Haut führen kann.
11. Bei häufigem Gebrauch wird empfohlen, das Armband wöchentlich zu reinigen. Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab und entfernen Sie Öl oder Staub mit einer milden Seife. Es ist nicht ratsam, das Armband beim Heißbad tragen.


FRANÇAIS

CONFIGURATION REQUISE :

iOS 9.0 ou version ultérieure, Android 5.0 ou version ultérieure, Bluetooth 5.3.

INSTALLER L'APPLICATION

Téléchargez l'application en scannant le code QR ou en recherchant « Fit-CloudPro » dans l'App Store ou le Google Play Store.

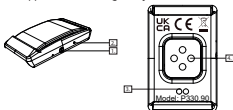

DISPOSITION DE L'APPAREIL

1. Marche/Arrêt
2. Voyant lumineux
3. Port de chargement
4. Capteur de fréquence cardiaque et d'oxygène dans le sang

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de la batterie	145 mAh
Alimentation	5 V/0,5 A
Autonomie	12 jours
Temps de chargement	2 heures
Version BT	5.4



Nom d'appairage BT	Endo
Compatibilité	iOS 9.0 + Android 5.0
Étanche	1 ATM

*Les durées sont approximatives et dépendent de l'état de la batterie.

Important : utilisez uniquement les accessoires fournis ou des accessoires certifiés et testés pour alimenter cet appareil. L'utilisation d'accessoires tiers peut compromettre la sécurité de l'appareil.

CHARGEMENT

Avant d'utiliser le tracker de santé pour la première fois, assurez-vous qu'il est complètement chargé. Utilisez le câble de chargeur magnétique fourni. Branchez l'extrémité USB-A dans un port USB-A d'un ordinateur ou d'un adaptateur secteur compatible 5 V/0,5 A. Pendant la charge, le voyant lumineux est rouge. Une fois la charge terminée, le voyant s'éteint. Une charge complète prend environ 2 heures.

CONNEXION

1. Après avoir téléchargé l'application, activez le Bluetooth sur votre téléphone. Ouvrez l'application FitCloudPro, accédez à la page de l'appareil et appuyez sur « Bind Device ». L'application détectera le tracker de santé sous le nom « Endo ».
2. Une fois le tracker de santé correctement appairé avec l'application, une fenêtre contextuelle s'affichera pour demander l'autorisation d'utiliser la fonction d'appel sans fil. Appuyez sur « Autoriser ». Ce n'est qu'alors que la fonction d'appel téléphonique pourra être utilisée.

Remarque :

- Veuillez ne pas coupler directement l'appareil dans la liste Bluetooth du système de votre téléphone portable afin d'éviter que l'application « Fit-CloudPro » ne parvienne pas à se connecter au tracker de santé.

-
- Veuillez autoriser l'application « FitCloudPro » à accéder aux autorisations telles que « Localisation, Téléphone, Appareil photo » de votre téléphone portable afin de garantir un couplage réussi.
 - L'appareil doit se connecter via l'application. Ne le coupez pas directement via Bluetooth sur votre appareil mobile.

PRÉSENTATION DES FONCTIONS

1. Comptage des pas

Compte les pas quotidiens pour surveiller les niveaux d'activité.

2. Surveillance de la fréquence cardiaque

Mesure automatiquement la fréquence cardiaque (environ toutes les 30 minutes).

3. Surveillance de l'oxygène dans le sang

Mesure les niveaux d'oxygène dans le sang à la demande.

4. Notifications

Vibre et affiche des alertes pour les appels, les messages et les applications.

5. Fonction alarme

Définissez des alarmes pour des rappels et des alertes de réveil.

6. Suivi de la santé féminine

Suit les cycles menstruels et les données associées.

7. Contrôle à distance de l'appareil photo

Secouez l'appareil pour prendre des photos sur votre téléphone.

8. Localiser l'appareil

Localisez votre tracker via l'application (l'appareil vibrera).

9. Modes sport

Prend en charge modes d'activité (à l'exception des sports nautiques).

10. Suivi du sommeil

Suivi du sommeil lorsque porté pendant la nuit (recommandé : 22 h – 8 h).

AVERTISSEMENT !

1. L'application n'est pas un dispositif médical. Les données obtenues lors de l'utilisation de l'application sont fournies à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins de diagnostic clinique, de recherche médicale, de diagnostic ou de traitement.
2. Veuillez éviter d'exposer le bracelet à des chocs violents, à une chaleur extrême ou à une exposition prolongée.
3. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas la montre vous-même.
4. Cette montre utilise une alimentation de 5 V/0,5 A pour la recharge. Il est strictement interdit d'utiliser une alimentation électrique surtendue pour la recharge.
5. Ne rechargez pas pendant plus de 8 heures.
6. La température de fonctionnement de cette montre est comprise entre 0 °C et 40 °C. Il est interdit de la jeter au feu afin d'éviter tout risque d'explosion.
7. Évitez tout contact avec des produits chimiques tels que l'essence, les solvants de nettoyage, le propanol, l'alcool ou les répulsifs anti-insectes.
8. N'utilisez pas ce produit dans un environnement soumis à une tension élevée ou à un champ magnétique intense.
9. Si vous avez la peau sensible ou si vous serrez trop le bracelet, vous pourriez ressentir une gêne.
10. Veuillez essuyer rapidement les gouttes de sueur sur votre poignet. Le bracelet peut être exposé pendant une longue période au savon, à la sueur, à des allergènes ou à des composants polluants, ce qui peut provoquer des démangeaisons cutanées.
11. Si vous l'utilisez souvent, il est recommandé de nettoyer le bracelet chaque semaine. Essuyez-le avec un chiffon humide et éliminez l'huile ou la poussière à l'aide d'un savon doux. Il n'est pas conseillé de porter le bracelet pour prendre un bain chaud.


ESPAÑOL

REQUISITOS DEL DISPOSITIVO:

iOS 9.0 o posterior, Android 5.0 o posterior, Bluetooth 5.3.

INSTALA LA APLICACIÓN

Descarga la aplicación escaneando el código QR o buscando «FitCloudPro» en la App Store o en Google Play Store.

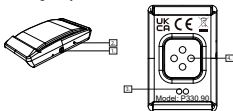

DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO

1. Encendido/Apagado
2. Luz indicadora
3. Puerto de carga
4. Sensor de frecuencia cardíaca y de oxígeno en sangre

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la batería	145 mAh
Entrada	5 V/0,5 A
Tiempo de funcionamiento	12 días
Tiempo de carga	2 horas
Versión BT	5.4



Nombre de emparejamiento BT	Endo
Compatibilidad	iOS 9.0 + Android 5.0
Resistente al agua	1 ATM

*Los tiempos son solo aproximados y dependen del estado de la batería.

Importante: Utiliza únicamente los accesorios incluidos o accesorios certificados y probados para alimentar este dispositivo. El uso de accesorios de terceros puede afectar a la seguridad del producto.

CARGA

Antes de utilizar el monitor de salud por primera vez, asegúrate de que esté completamente cargado. Utiliza el cable de carga magnético incluido. Conecta el extremo USB-A a un puerto USB-A de un ordenador o a un adaptador de corriente compatible de 5 V/0,5 A. Durante la carga, el indicador luminoso se muestra en rojo. Cuando esté completamente cargado, el indicador luminoso se apagará. La carga completa tarda aproximadamente 2 horas.

CONEXIÓN

1. Después de descargar la aplicación, active el Bluetooth en su teléfono. Abra la aplicación FitCloudPro, acceda a la página del dispositivo y pulse «Vincular dispositivo». La aplicación detectará el monitor de salud como «Endo».
2. Una vez que el monitor de salud se haya emparejado correctamente con la aplicación, aparecerá un mensaje solicitando permisos para utilizar la función de llamada inalámbrica. Pulse «Permitir». Solo entonces se podrá utilizar la función de llamada telefónica.

Nota:

- No empareje directamente el dispositivo en la lista de Bluetooth del sistema del teléfono móvil para evitar que la aplicación «FitCloudPro» no se conecte

al monitor de actividad.

- Permita que la aplicación «FitCloudPro» obtenga permisos como «Ubicación, Teléfono, Cámara» de su teléfono móvil para garantizar un emparejamiento correcto.
- El dispositivo debe conectarse a través de la aplicación. No lo empareje directamente por Bluetooth en su dispositivo móvil.

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES

1. Recuento de pasos

Registra los pasos diarios para controlar los niveles de actividad.

2. Monitorización de la frecuencia cardíaca

Mide automáticamente la frecuencia cardíaca (aproximadamente cada 30 minutos).

3. Monitorización del oxígeno en sangre

Mide los niveles de oxígeno en sangre cuando se solicite.

4. Notificaciones

Vibra y muestra alertas de llamadas, mensajes y aplicaciones.

5. Función de alarma

Configura alarmas para recordatorios y avisos de despertador.

6. Seguimiento de la salud femenina

Realiza un seguimiento de los ciclos menstruales y datos relacionados.

7. Control remoto de la cámara

Agita el dispositivo para hacer fotos con tu teléfono.

8. Buscar dispositivo

Localiza tu rastreador a través de la aplicación (el dispositivo vibrará).

9. Modos deportivos

Admite modos de actividad (excluidos los deportes acuáticos).

10. Seguimiento del sueño

Realiza un seguimiento del sueño cuando se lleva puesto durante la noche (recomendado: de 22:00 a 08:00).

¡ADVERTENCIA!

1. La aplicación no es un dispositivo médico. Los datos obtenidos durante el uso de la aplicación son solo de referencia y no deben utilizarse con fines de diagnóstico clínico, investigación médica, diagnóstico o tratamiento.
2. Evite que la pulsera sufra impactos fuertes, calor extremo o exposición a condiciones extremas.
3. No desmonte, repare ni modifique el reloj por su cuenta.
4. Este reloj utiliza 5 V/0,5 A para la carga. Queda estrictamente prohibido utilizar una fuente de alimentación con sobrecarga de voltaje para la carga.
5. No lo cargue durante más de 8 horas.
6. El entorno operativo de este reloj es de 0 °C a 40 °C. Está prohibido arrojarlo al fuego para evitar provocar una explosión.
7. No lo exponga a productos químicos como gasolina, disolventes de limpieza, propanol, alcohol o repelentes de insectos.
8. No utilice este producto en entornos de alta tensión o con campos magnéticos intensos.
9. Si tiene la piel sensible o lleva la pulsera demasiado apretada, puede sentir molestias.
10. Limpie a tiempo las gotas de sudor de la muñeca. La correa puede estar expuesta durante mucho tiempo al jabón, el sudor, alérgenos o componentes contaminantes, lo que puede provocar picor en la piel.
11. Si lo utiliza con frecuencia, se recomienda limpiar la pulsera cada semana. Límpiela con un paño húmedo y elimine la grasa o el polvo con un jabón suave. No es recomendable llevar la pulsera puesta mientras se toma un baño caliente.


SVENSKA

SYSTEMKRAV:

iOS 9.0 eller senare, Android 5.0 eller senare, Bluetooth 5.3.

INSTALLERA APPEN

Ladda ner appen genom att antingen skanna QR-koden eller söka efter "FitC-

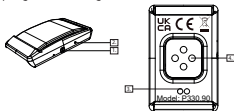

loudPro" och ladda ner den från App Store eller Google Play.

ENHETENS UPPBYGGNAD

1. På/Av
2. Indikatorlampa
3. Laddningsport
4. Puls- och syresensor

SPECIFIKATIONER

Batterikapacitet

145 mAh

Ingång

5V/0,5A

Driftstid

12 dagar

Laddningstid

2 timmar



BT-version	5.4
BT-parningsnamn	Endo
Kompatibilitet	iOS 9.0 + Android 5.0
Vattentät	1 ATM

*Tiderna är endast ungefärliga och beror på batteriets skick.

Viktigt: Använd endast medföljande tillbehör eller certifierade och testade tillbehör för att driva denna enhet. Användning av tillbehör från tredje part kan påverka produktens säkerhet.

LADDNING

Innan du använder hälsotrackern för första gången, se till att den är fulladdad. Använd den medföljande magnetiska laddningskabeln. Anslut USB-A-änden till en USB-A-port på en dator eller en kompatibel 5V/0,5A-strömadapter. Under laddning lyser indikatorlampan rött. När den är fulladdad slocknar indikatorlampan. Full laddning tar cirka 2 timmar.

ANSLUTNING

1. När du har laddat ner appen, slå på Bluetooth på din telefon. Öppna FitCloudPro-appen, gå till enhetssidan och tryck på "Bind Device". Appen hittar hälsotrackern som "Endo".
2. När hälsotrackern har parats ihop med appen dyker en uppmaning upp som ber om behörighet att använda den trådlösa samtalsfunktionen. Tryck på "Allow". Först då kan telefonsamtalsfunktionen användas.
Obs!
 - Koppla inte ihop enheten direkt i Bluetooth-listan på mobiltelefonen för att undvika att appen "FitCloudPro" inte kan ansluta till hälsotrackern.

-
- Ge appen "FitCloudPro" behörighet till "Plats, Telefon, Kamera" på din mobiltelefon för att säkerställa en lyckad koppling.
 - Enheten måste anslutas via appen. Koppla inte ihop direkt via Bluetooth på din mobila enhet.

FUNKTIONSÖVERSIKT

1. Stegräkning

Spårar dagliga steg för att övervaka aktivitetsnivåer.

2. Pulsättning

Mäter automatiskt pulsen (ungefär var 30:e minut).

3. Blodsyremätning

Mäter syrenivåerna i blodet på begäran.

4. Meddelanden

Vibrerar och visar aviseringar för samtal, meddelanden och appar.

5. Väckarklocka

Ställ in alarm för påminnelser och väckning.

6. Hälsoövervakning för kvinnor

Spårar menstruationscykler och relaterade data.

7. Fjärrstyrning av kamera

Skaka enheten för att ta bilder på din telefon.

8. Hitta enhet

Lokalisera din tracker via appen (enheten vibrerar).

9. Sportlägen

Stöder aktivitetslägen (exklusive vattensporter).

10. Sömnspårning

Spårar sömnen när den bärs över natten (rekommenderat: 22:00 – 08:00).

VARNING!

1. Appen är inte en medicinsk enhet. Data som erhålls under användning av appen är endast för referens och bör inte användas för klinisk diagnostik, medicinsk forskning, diagnostik eller behandlingsändamål.
2. Undvik att utsätta armbandet för kraftiga stötar, extrem värme och exponering.
3. Demontera, reparera eller modifiera inte klockan själv.
4. Denna klocka använder 5V/0,5A för laddning. Det är strängt förbjudet att använda strömkällor med för hög spänning för laddning.
5. Ladda inte i mer än 8 timmar.
6. Drifttemperaturen för denna klocka är 0 °C - 40 °C. Det är förbjudet att kasta den i eld för att undvika explosion.
7. Undvik kontakt med kemikalier såsom bensin, rengöringsmedel, propanol, alkohol eller insektsmedel.
8. Använd inte denna produkt i miljöer med hög spänning eller stark magnetism.
9. Om du har känslig hud eller bär armbandet för hårt kan det kännas obehagligt.
10. Torka bort svett droppar från handleden i tid. Armbandet kan utsättas för tvål, svett, allergener eller förorenande ämnen under lång tid, vilket kan orsaka klåda.
11. Om du använder den ofta rekommenderas det att rengöra armbandet varje vecka. Torka av med en fuktig trasa och ta bort olja eller damm med en mild tvål. Det är inte tillrådligt att ha på sig armbandet när du tar ett varmt bad.


ITALIANO

REQUISITI DEL DISPOSITIVO:

iOS 9.0 o versioni successive, Android 5.0 o versioni successive, Bluetooth 5.3.

INSTALLA L'APP

Scarica l'app scansionando il codice QR oppure cerca "FitCloudPro" e scaricala dall'App Store o dal Google Play Store.

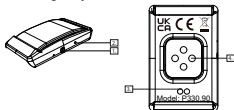

DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO

1. On/Off
2. Spia luminosa
3. Porta di ricarica
4. Sensore di frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue

SPECIFICHE

Capacità della batteria

145 mAh

Ingresso

5V/0,5A

Autonomia

12 giorni

Tempo di ricarica

2 ore

Versione BT

5.4



Nome di accoppiamento BT	Endo
Compatibilità	iOS 9.0 + Android 5.0
Impermeabile	1ATM

*I tempi sono solo approssimativi e dipendono dalle condizioni della batteria.

Importante: utilizza solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per alimentare questo dispositivo. L'uso di accessori di terze parti può compromettere la sicurezza del dispositivo.

RICARICA

Prima di utilizzare il tracker per la prima volta, assicurarsi che sia completamente carico. Utilizzare il cavo di ricarica magnetico in dotazione. Collegare l'estremità USB-A a una porta USB-A su un computer o a un alimentatore compatibile da 5V/0,5A. Durante la ricarica, la spia luminosa è rossa. A carica completa, la spia luminosa si spegne. La ricarica completa richiede circa 2 ore.

CONNESSIONE

1. Dopo aver scaricato l'app, attiva il Bluetooth sul tuo telefono. Apri l'app FitCloudPro, accedi alla pagina del dispositivo e premi "Bind Device". L'app troverà il tracker di salute come "Endo".
2. Una volta che il tracker di salute è stato accoppiato con successo con l'app, apparirà un messaggio che richiede le autorizzazioni per utilizzare la funzione di chiamata wireless. Premi "Consenti". Solo allora sarà possibile utilizzare la funzione di chiamata.

Nota:

- Si prega di non accoppiare direttamente il dispositivo dall'elenco Bluetooth del sistema del telefono cellulare per evitare che l'app "FitCloudPro" non riesca a connettersi al dispositivo di monitoraggio della salute.

-
- Si prega di consentire all'app 'FitCloudPro' di ottenere le autorizzazioni relative a "Posizione, Telefono, Fotocamera" del proprio telefono cellulare per garantire un accoppiamento corretto.
 - Il dispositivo deve connettersi tramite l'app. Non accoppiare direttamente tramite BT sul proprio dispositivo mobile.

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI

1. Conta passi

Conta i passi giornalieri per monitorare i livelli di attività.

2. Monitoraggio della frequenza cardiaca

Misura automaticamente la frequenza cardiaca (circa ogni 30 minuti).

3. Monitoraggio dell'ossigeno nel sangue

Misura i livelli di ossigeno nel sangue su richiesta.

4. Notifiche

Vibra e visualizza avvisi per chiamate, messaggi e app.

5. Funzione sveglia

Imposta sveglie per promemoria e avvisi di risveglio.

6. Monitoraggio della salute femminile

Monitora i cicli mestruali e i dati correlati.

7. Controllo remoto della fotocamera

Agita il dispositivo per scattare foto sul tuo telefono.

8. Trova dispositivo

Individua il tuo tracker tramite l'app (il dispositivo vibrerà).

9. Modalità sportive

Supporta modalità di attività (esclusi gli sport acquatici).

10. Monitoraggio del sonno

Monitora il sonno quando indossato durante la notte (consigliato: dalle 22:00 alle 8:00).

ATTENZIONE!

1. L'app non è un dispositivo medico. I dati ottenuti durante l'uso dell'app sono solo a titolo di riferimento e non devono essere utilizzati per scopi clinici, di ricerca medica, diagnostici o terapeutici.
2. Evitare di sottoporre il braccialetto a forti urti, calore estremo ed esposizione.
3. Non smontare, riparare o modificare l'orologio da soli.
4. Questo orologio utilizza 5V/0,5A per la ricarica. È severamente vietato utilizzare alimentatori con tensione eccessiva per la ricarica.
5. Non ricaricare per più di 8 ore.
6. L'ambiente operativo di questo orologio è compreso tra 0 °C e 40 °C. È vietato gettarlo nel fuoco per evitare di causare un'esplosione.
7. Non esporlo a sostanze chimiche quali benzina, solventi per la pulizia, propanolo, alcool o repellenti per insetti.
8. Non utilizzare questo prodotto in ambienti ad alta tensione o con forte campo magnetico.
9. Se hai la pelle sensibile o indossi il braccialetto troppo stretto, potresti provare fastidio.
10. Si prega di asciugare tempestivamente le gocce di sudore dal polso. Il cinturino potrebbe essere esposto a lungo a sapone, sudore, allergeni o agenti inquinanti, il che potrebbe causare prurito cutaneo.
11. Se lo si utilizza spesso, si consiglia di pulire il bracciale ogni settimana. Pulirlo con un panno umido e rimuovere olio o polvere con un sapone delicato. Non è consigliabile indossare il bracciale durante un bagno caldo.


POLSKI

WYMAGANIA SYSTEMOWE:

iOS 9.0 lub nowszy, Android 5.0 lub nowszy, Bluetooth 5.3.

INSTALACJA APLIKACJI

Pobierz aplikację, skanując kod QR lub wyszukując „FitCloudPro” w sklepie Apple Store lub Google Play Store.

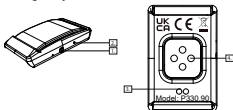

UKŁAD URZĄDZENIA

1. Włączanie/Wyłączanie
2. Lampka kontrolna
3. Port ładowania
4. Czujnik tętna i saturacji

SPECYFIKACJA

Pojemność baterii

145 mAh

Wejście

5V/0,5A

Czas pracy

12 dni

Czas ładowania

2 godziny

Wersja BT

5.4



Nazwa parowania BT	Endo
Kompatybilność	iOS 9.0 + Android 5.0
Wodoodporność	1ATM

*Podane czasy są jedynie orientacyjne i zależą od stanu baterii.

Ważne: Do zasilania tego urządzenia używaj wyłącznie dołączonych akcesoriów lub akcesoriów certyfikowanych i przetestowanych. Używanie akcesoriów innych producentów może wpłynąć na bezpieczeństwo urządzenia.

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem urządzenia monitorującego stan zdrowia upewnij się, że jest ono w pełni naładowane. Użyj dołączonego kabla z ładowarką magnetyczną. Podłącz końcówkę USB-A do portu USB-A w komputerze lub kompatybilnej ładowarki 5V/0,5A. Podczas ładowania dioda sygnalizacyjna świeci na czerwono. Po pełnym naładowaniu dioda sygnalizacyjna gaśnie. Pełne naładowanie trwa około 2 godzin.

ŁĄCZENIE

1. Po pobraniu aplikacji włącz Bluetooth w telefonie. Otwórz aplikację FitCloudPro, przejdź do strony urządzenia i naciśnij „Połącz urządzenie”. Aplikacja znajdzie monitor aktywności fizycznej jako „Endo”.
2. Po pomyślnym sparowaniu monitora aktywności fizycznej z aplikacją pojawi się komunikat z prośbą o uprawnienia do korzystania z funkcji połączeń bezprzewodowych. Naciśnij „Zezwól”. Dopiero wtedy można korzystać z funkcji połączeń telefonicznych.

Uwaga:

- Proszę nie łączyć urządzenia bezpośrednio z listy Bluetooth w systemie telefonu komórkowego, aby uniknąć sytuacji, w której aplikacja „FitCloudPro” nie połączy się z monitorem aktywności.

-
- Proszę zezwolić aplikacji „FitCloudPro” na uzyskanie uprawnień, takich jak „Lokalizacja, Telefon, Aparat” w telefonie komórkowym, aby zapewnić poprawne sparowanie.
 - Urządzenie musi łączyć się za pośrednictwem aplikacji. Nie należy łączyć go bezpośrednio przez BT na urządzeniu mobilnym.

OPIS FUNKCJI

1. Licznik kroków

Śledzi liczbę kroków dziennie w celu monitorowania poziomu aktywności.

2. Monitorowanie tętna

Automatycznie mierzy tętno (co około 30 minut).

3. Monitorowanie saturacji

Mierzy poziom saturacji na żądanie.

4. Powiadomienia

Wibruje i wyświetla powiadomienia o połączeniach, wiadomościach i aplikacjach.

5. Funkcja budzika

Ustawianie alarmów jako przypomnień i budzika.

6. Śledzenie zdrowia kobiet

Śledzi cykle menstruacyjne i powiązane dane.

7. Zdalne sterowanie aparatem

Potrząśnij urządzeniem, aby zrobić zdjęcie telefonem.

8. Znajdź urządzenie

Zlokalizuj tracker za pomocą aplikacji (urządzenie zacznie wibrować).

9. Tryby sportowe

Obsługuje trybów aktywności (z wyłączeniem sportów wodnych).

10. Śledzenie snu

Śledzi sen podczas noszenia przez całą noc (zalecane: 22:00 – 8:00).

UWAGA!

1. Aplikacja nie jest urządzeniem medycznym. Dane uzyskane podczas korzystania z aplikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być wykorzystywane do celów diagnostyki klinicznej, badań medycznych, diagnozowania lub leczenia.
2. Należy chronić bransoletkę przed silnymi uderzeniami, ekstremalnym ciepłem i ekspozycją na słońce.
3. Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować zegarka.
4. Zegarek ładuje się przy użyciu zasilacza 5 V/0,5 A. Surowo zabrania się używania zasilacza o zbyt wysokim napięciu do ładowania.
5. Nie należy ładować przez ponad 8 godzin.
6. Zakres temperatur pracy tego zegarka wynosi od 0°C do 40°C. Zabrania się wrzucania go do ognia, aby uniknąć wybuchu.
7. Nie należy narażać zegarka na działanie substancji chemicznych, takich jak benzyna, rozpuszczalniki czyszczące, propanol, alkohol lub środki odstraszające owady.
8. Nie należy używać tego produktu w środowisku o wysokim napięciu i silnym polu magnetycznym.
9. Jeśli masz wrażliwą skórę lub nosisz bransoletkę zbyt ciasno, możesz odczuwać dyskomfort.
10. Proszę na czas wycierać krople potu z nadgarstka. Pasek może być przez długi czas narażony na działanie mydła, potu, alergenów lub zanieczyszczeń, co może powodować swędzenie skóry.
11. Jeśli używasz go często, zaleca się czyszczenie bransoletki co tydzień. Wytrzyj ją wilgotną szmatką i usuń tłuszcz lub kurz łagodnym mydłem. Nie zaleca się noszenia bransoletki podczas gorącej kąpieli.

EXPLANATION WEEE LOGO:



ENGLISH

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

DUTCH

Het doorgestreepte afvalbak-symbool geeft aan dat het item apart moet worden weggegooid van het huishoudelijk afval. Het item moet worden ingeleverd voor recycling volgens de lokale milieuregels voor afvalverwerking. Door een gemarkeerd item te scheiden van huishoudelijk afval, helpt u het volume van afval dat naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd te verminderen en eventuele mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.

GERMAN

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol zeigt an, dass der Gegenstand getrennt von Hausmüll entsorgt werden sollte. Der Gegenstand sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zur Abfallentsorgung zum Recycling abgegeben werden. Indem Sie einen gekennzeichneten Gegenstand vom Hausmüll trennen, helfen Sie, das Volumen des Mülls, der in Verbrennungsanlagen oder Deponien landet, zu reduzieren und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.

FRENCH

Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'objet doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un objet marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume des déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

FRENCH

Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'objet doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un objet marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume des déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

SPANISH

El símbolo de la papelera tachada indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. El artículo debe entregarse para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a incineradoras o vertederos y minimizar cualquier impacto negativo potencial en la salud humana y el medio ambiente.

SWEDISH

Den överstrukna soptunnan symbolen indikerar att föremålet ska kastas separat från hushållssopor. Föremålet ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöregler för avfallshantering. Genom att separera ett markerat föremål från hushållssopor hjälper du till att minska mängden avfall som skickas till förbränningsanläggningar eller deponier och minimera eventuella potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljö.

ITALIAN

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'oggetto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. L'oggetto deve essere consegnato per il riciclo in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un oggetto contrassegnato dai rifiuti domestici, contribuirai a ridurre il volume di rifiuti inviati agli inceneritori o alle discariche e a minimizzare eventuali potenziali impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

POLISH

Przekreślony symbol kosza na kołach wskazuje, że przedmiot powinien być usuwany oddzielnie od odpadów domowych. Przedmiot powinien zostać dostarczony do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie utylizacji odpadów. Poprzez oddzielenie oznaczonego przedmiotu od odpadów domowych, pomożesz zmniejszyć ilość odpadów wysyłanych do spalarni lub składowisk i zminimalizować potencjalne negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

EU Declaration of Conformity

ENGLISH

XD Connects B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The complete Declaration of Conformity can be found at www.xdconnects.com > search on item number.

DEUTSCH

XD Connects B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.xdconnects.com > suchen Sie nach der Artikelnummer.

ESPAÑOL

Por la presente, XD Connects B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

La Declaración de conformidad completa puede consultarse en www.xdconnects.com > busque por la referencia.

FRANÇAIS

XD Connects B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/EU.

La Déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur www.xdconnects.com > rechercher le numéro de l'article.

ITALIANO

XD Connects B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.xdconnects.com > ricerca per numero di articolo.

NEDERLANDS

XD Connects B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/53/EU.

De complete Verklaring van conformiteit is te vinden op www.xdconnects.com > waar u kunt zoeken op het itemnummer.

SVERIGE

XD Connects B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på www.xdconnects.com > sök efter artikelnummer.

POLSKI

Firma XD Connects B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU.

Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie www.xdconnects.com, wyszukując numer artykułu.

XD Connects B.V.
Lange Kleiweg 6-28
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
1F, iCentrum, Holt Street,
Birmingham, B7 4BP, England

